

# IOWA BRACE

NAUDOTOJO VADOVAS  
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJAMS



CLUBFOOT SOLUTIONS, INC.  
2509 RIVER RUN CT. NE  
CEDAR RAPIDS, IA 52411, JAV  
319-294-5382  
INFO@CLUBFOOTSOLUTIONS.ORG

Šis vadovas yra skirtas sveikatos priežiūros darbuotojams, kurie gydo pacientus su įgimta šleivapėdyste.

Vaizdo medžiagą apie tai, kaip surinkti įtvarą Iowa Brace ir uždėti jį vaikui, galite peržiūrėti šioje svetainėje: <http://www.clubfootsolutions.org/>

Tėvai ir globėjai gali pasinaudoti šiais informacijos šaltiniais:

- Nemokama programėlė Clubfoot Solutions
- YouTube kanalas Clubfoot Solutions
- Svetainė Clubfoot Solutions

**Mes rekomenduojame sveikatos priežiūros darbuotojams, prieš perduodant įtvarą Iowa Brace paciento tėvams ar globėjams, arba prieš uždedant jį pacientui, perskaityti šį vadovą.**

Daugiau informacijos rasite svetainėje [www.clubfootsolutions.org](http://www.clubfootsolutions.org); taip pat galite kreiptis į Clubfoot Solutions, 2509 River Run Ct. NE, Cedar Rapids, IA 52411, JAV, arba skambinti telefonu (+1) 319-294-5382.



## TURINYS

Kontraindikacijos.....	4
Įtvaro Iowā Brace aprašymas.....	4
Vienpusės kairiosios pėdos šleivapėdystės pavyzdys (1 pav.).....	4
Įtvaro Iowā Brace dalys.....	4
Batai (2 pav.).....	5
Platformos (3 pav.).....	5
Intarpai ir varžtai (4 pav.).....	5
Atlaisvinimo spaustukas (5 pav.).....	5
Lanksti plokštelė Iowā Flexbar.....	5
Įtvaro surinkimas.....	6
Kaip nustatyti teisingą kiekvieno bato pasukimo kampą.....	6
Koreguotos abipusės šleivapėdystės pavyzdys (6 pav.).....	6
Koreguotos kairiosios pėdos šleivapėdystės pavyzdys (7 pav.).....	7
Platformos pritvirtinimas prie bato, suformuojant 60 laipsnių pėdos abdukciją.....	7
Platformos pritvirtinimas prie bato, suformuojant 30 laipsnių pėdos abdukciją.....	9
Lanksčios plokštelės Iowā Flexbar pritvirtinimas prie batų..	10
Platformos atkabinimas nuo lanksčios plokštelės.....	10
Atlaisvinimo spaustuko pavyzdys (8 pav.).....	10
Įtvaro uždėjimas vaikui.....	11
Vaiko kulno pastūmimas žemyn ir atgal (9 pav.).....	11
Liežuvis už bato AFO įdėklo (10 pav.).....	11
Įtvaro nuėmimas.....	12
Dirželio atsegimas (11 pav.).....	12
Lanksčios plokštelės atkabinimas nuo platformos (12 pav.)	12
Valymas ir priežiūra.....	12
Pagalba tėvams ir globėjams dėl teisingo įtvaro nešiojimo.....	13
Problemos ir jų sprendimo būdai.....	13
Clubfoot Solutions gaminių Iowā Brace sąrašas.....	14
Dydžių lentelė (JAV dydžiai).....	15

Iowā  
Brace

Pristato Clubfoot Solutions

## Kontraindikacijos

DĖMESIO: Įtvaras IOWA Brace skirtas nešioti vaikams, kuriems įgimta šleivapėdystė visiškai išgydyta (koreguota) Ponseti metodu. Įtvaro negalima naudoti dalinės šleivapėdystės korekcijos atveju arba esant šleivapėdystės recidyvui, nes įtvaras sukels vaikui skausmą ar net jį sužalos.

Jeigu kuri nors įtvaro IOWA Brace dalis (batas, dirželiai, platforma, intarpai, varžtai ar lanksti plokštelė IOWA Flexbar) suplyšta, sulūžta, funkcionuoja netinkamai ar yra sugadinta, šios dalies nenaudokite. Informaciją apie gaminio garantiją, pakeitimą ir sugrąžinimą rasite svetainėje <http://www.clubfootsolutions.org/> arba sužinosite susisiekę su Clubfoot Solutions.

Jeigu, nešiojant įtvarą IOWA Brace, atsiranda vaiko odos sudirginimo požymių, pūslių ar pastebimas kitoks nepageidaujamas poveikis, kurio nepavyksta išvengti teisingai nešiojant įtvarą (dar žr. toliau „Problemos ir jų sprendimo būdai“), kreipkitės į vaiko gydytoją ar sveikatos priežiūros darbuotoją, prižiūrintį vaiką.

## Įtvaro IOWA Brace aprašymas

Įtvaras IOWA Brace nešiojamas siekiant išlaikyti koreguotos šleivapėdystės rezultatus ir užkirsti kelią šleivapėdystės recidyvui po to, kai šleivapėdystė buvo visiškai išgydyta (koreguota) Ponseti metodu. Įtvaras vaikams uždedamas ant abiejų pėdų, nežiūrint to, kad yra nustatyta tik vienos pėdos šleivapėdystė. Batai pasukami į išorę, suformuojant 60 laipsnių pėdos su koreguota šleivapėdyste abdukciją ir 30 laipsnių sveikosios pėdos abdukciją.



1 pav. Įtvaras IOWA Brace esant vienpusei kairiosios pėdos šleivapėdystei

Šiame pavyzdyje, kur parodyta kairiosios pėdos šleivapėdystė, kairiojo bato platforma pasukta 60 laipsnių kampą, o dešiniojo bato platforma – 30 laipsnių kampą.

## Įtvaro IOWA Brace dalys

Įtvarą IOWA Brace sudaro šios dalys:

- Šleivapėdystės korekcinio įtvaro batų pora (kairi ir dešinytis)
- Dvi platformos (po vieną kiekvienam batui)
- Du intarpai (po vieną kiekvienai platformai)
- Keturi varžtai (po du kiekvienai platformai)
- Viena lanksti plokštelė IOWA Flexbar
- Du atlaisvinimo spaustukai



## Batai

Kiekvienas batas turi čiurnos–pėdos ortozės (AFO) tipo įdėklą, liežuvių ir dirželius su sustiprintomis sagtelėmis. Atviras bato priekis patogus tuo, kad pėdai užtikrinama pakankamai vietos augti, kol prireiks kito batų dydžio. Batai gaminami dvylikos dydžių, pagal JAV vaikiškos avalynės dydžius – nuo 000 iki 9 (žr. dydžių lentelę, 15 psl.).




2 pav. Iowa Brace batai

## Platformos


Platformos gali būti naudojamos su kairiuoju arba dešiniuoju batų. Platformos šonuose turi dvi angas, į kurias įstačius lanksčią plokštelę Iowa Flexbar, nustatomas reikiamas batų pasukimo kampas. Fiksatorius, esantis platformos apatinėje pusėje, neleidžia vaikams patiems atlaisvinti plokštelės. Clubfoot Solutions prie įtvoro komplekto prideda atlaisvinimo spaustuką, su kuriuo lanksčią plokštelę Iowa Flexbar galima atlaisvinti ir atkabinti nuo platformos. Platformos yra dviejų dydžių. Mažiausios platformos yra skirtos 000–3 dydžio batams, didesnės platformos – 4–9 dydžio batams.



3 pav. Iowa Brace platforma

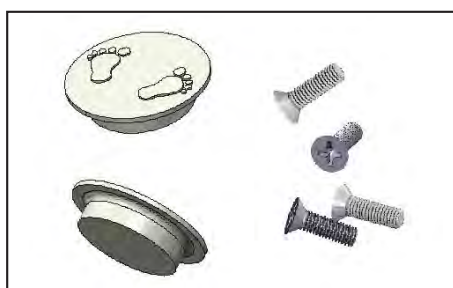

4 pav. Intarpai ir varžtai

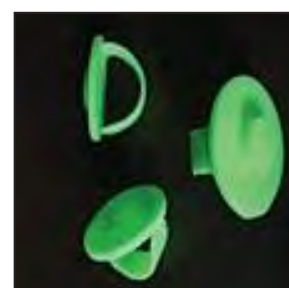

5 pav. Atlaisvinimo spaustukas

Prie platformų pridedami intarpai padeda išlaikyti nustatytą teisingą platformų pasukimo kampą: įdėjus tarpus, įtvoras neužsifiksuos netinkamu kampu. Platformos pridedamais varžtais pritvirtinamos prie Iowa Brace batų. Atlaisvinimo spaustukas palengvina platformų atkabimą nuo lanksčios plokštelės.

## Lanksti plokštelė Iowa Flexbar

Lanksčios plokštelės Iowa Flexbar galai yra 15 laipsnių kampu palenkiami išorėn. Kai vaikas nešioja įtvorą, lanksčios plokštelės Iowa Flexbar galai yra nukreipti į viršų, link kelių. Lanksti plokštelė yra trijų ilgių. Nors plokštelės ilgį parenka sveikatos priežiūros specialistas savo nuožiūra, siūlomi tokie plokštelės ilgiai pagal batų dydžius:

- Batų dydis nuo 000 iki 3: 20,32 cm (8 colių) plokštelė
- Batų dydis nuo 4 iki 6: 25,40 cm (10 colių) plokštelė
- Batų dydis nuo 7 iki 9: 30,48 cm (12 colių) plokštelė

## Įtvaro surinkimas

Toliau paveikslėlyje parodyta, kaip tarpusavyje sujungiamos įtvaro IOWA Brace dalys.



Įtvaro IOWA Brace dalių sujungimas

Norėdami pasižiūrėti vaizdo medžiagą, kaip surinkti įtvarą ir uždėti jį vaikui, apsilankykite Clubfoot Solutions svetainėje: <http://www.clubfootsolutions.org/>

## Kaip nustatyti teisingą kiekvieno bato pasukimo kampą


Įtvarą gali nešioti vaikai su koreguota abipuse arba vienpuse šleivapėdyste. Jeigu vaikas turi abipusę šleivapėdystę, abu batai, prie kurių pritvirtinta lanksti plokštelė, pasukami į išorę 60 laipsnių kampų. Jeigu vaiko viena pėda yra su koreguota vienpuse šleivapėdyste, o kita pėda sveika, batai pasukami į išorę, suformuojant 60 laipsnių pėdos su koreguota šleivapėdyste abdukciją ir 30 laipsnių sveikosios pėdos abdukciją.

Koreguotos abipusės šleivapėdystės pavyzdys



6 pav. Abu batai pasukti į išorę 60 laipsnių kampų

Koreguotos kairiosios pėdos šleivapėdystės pavyzdys

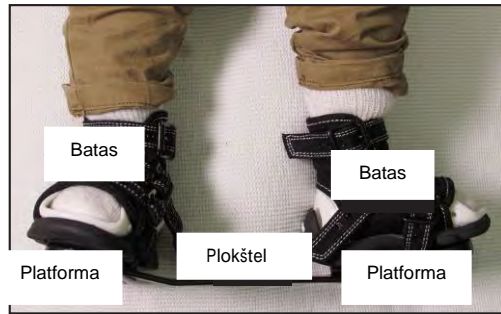

7 pav. Kairysis batas pasuktas į išorę 60 laipsnių kampu, dešinysis batas – 30 laipsnių kampu

## Platformos pritvirtinimas prie bato, suformuojant 60 laipsnių pėdos abdukciją

Pėdai su koreguota šleivapėdyste būtina palaikyti 60 laipsnių abdukciją. Platformas galima naudoti su kairiuoju arba dešiniuoju batų. Platformų šonuose yra dvi angos, pagal kurias nustatomas reikiamas batų pasukimo kampas, sujungus platformas lanksčia plokštele.

**Norint suformuoti 60 laipsnių pėdos abdukciją, platforma prie bato pritvirtinama tokiu būdu:**

1. Pakreipkite batą taip, kad jūsų žvilgsnis būtų nukreiptas į padą, o sagtelės būtų nukreiptos į vidų. Kairiojo bato sagtelės turi būti jums iš dešinės, o dešiniojo bato sagtelės – iš kairės.
2. Suraskite platformos šone esančią 60 laipsnių pasukimo kampo angą.

60 laipsnių pasukimo kampo anga




60 laipsnių pasukimo kampo anga yra arčiau platformos kulno sritys. 30 laipsnių pasukimo kampo anga yra priešingoje platformos pusėje.



3. Pridėkite platformą prie bato pado taip, kad 60 laipsnių pasukimo kampo anga būtų vidinėje pusėje (šalia bato sagtelių).

Šioje padėtyje Clubfoot Solution logotipe vaizduojami kojų pirštukai turi būti šalia bato pirštų sritys.

4. Įdėkite į centrinę platformos angą intarpą.

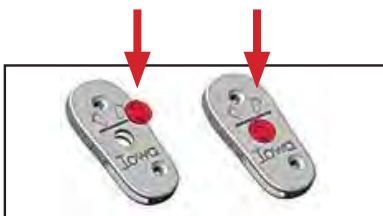

Šis intarpas neleidžia lanksčiai plokštei lowa Flexbar užsikisoti neteisingoje padėtyje, jeigu ji būtų įstatyta ne į tą angą. Įdėti intarpai lieka tarp bato ir platformos.

5. Dviem pridedamais varžtais tvirtai prisukite platformą prie bato.



- Nepriveržkite varžtų pernelyg stipriai.
- Mažos platformos turi dvi angas varžtams kulno srityje. Tiksliai uždėję platformą ant bato pado, įsukite varžtą į atitinkamą angą.
- Jeigu vienas varžtas yra ilgesnis už kitą, platformą bato pirštų dalyje pritvirtinkite su trumpesniu varžtu.



## Platformos pritvirtinimas prie bato, suformuojant 30 laipsnių pėdos abdukciją

Jeigu vaikui išgydyta (koreguota) vienos pėdos (vienpusė) šleivapėdystė, įtvarą reikia nešioti palaikant 30 laipsnių sveikosios pėdos abdukciją. Platformas galima naudoti su kairiuoju arba dešiniuoju batų. Platformų šonuose yra dvi angos, kurios padeda kontroliuoti bato pasukimo kampą, sujungus platformas lanksčia plokštele.

Norint suformuoti 30 laipsnių pėdos abdukciją, platforma prie bato pritvirtinama tokiu būdu:

1. Pakreipkite batą taip, kad jūsų žvilgsnis būtų nukreiptas į padą, o sagtelės būtų nukreiptos į vidų. Kairiojo bato sagtelės turi būti jums iš dešinės, o dešiniojo bato sagtelės – iš kairės.
2. Suraskite platformos šone esančią 30 laipsnių pasukimo kampo angą. 60 laipsnių pasukimo kampo anga yra arčiau platformos kulno srities. 30 laipsnių pasukimo kampo anga yra priešingoje platformos pusėje

30 laipsnių pasukimo kampas



3. Pridėkite platformą prie bato pado taip, kad 30 laipsnių pasukimo kampo anga būtų vidinėje pusėje (šalia bato sagtelių). Šioje padėtyje Clubfoot Solution logotipe vaizduojami kojų pirštukai turi būti šalia bato pirštų srities.
4. Dviem priedamais varžtais pritvirtinkite platformą prie bato.



- Nepriveržkite varžtų pernelyg stipriai.
- Mažos platformos turi dvi angas varžtams kulno srityje. Tiksliai uždėję platformą ant bato pado, įsukite varžtą į atitinkamą angą.
- Jeigu vienas varžtas yra ilgesnis už kitą, platformą bato pirštų dalyje pritvirtinkite su trumpesniu varžtu.

5. Įdėkite į centrinę platformos angą tarpą.



Šis tarpas neleidžia lanksčiai plokštei Lowa Flexbar užsifikuoti neteisingoje padėtyje, jeigu ji būtų įstatyta ne į tą angą.

## Lanksčios plokštelės Lowa Flexbar pritvirtinimas prie batų

Norint išlaikyti koreguotos šleivapėdystės rezultatus, batus reikia nešioti kartu su plokšte.

Norėdami pritvirtinti lanksčią plokštelę Lowa Flexbar prie batų:

1. Paimkite plokštelę taip, kad jos galai būtų nukreipti į viršų, tarsi šypsena.
2. Įstatykite plokštelės galus į angas, esančias kiekvienos platformos vidinėje (sagtelių) pusėje.
3. Patikrinkite, ar sagtelės nukreiptos į vidinę pusę ir ar įtvaras sureguliuotas taip, kad būtų palaikoma 60 laipsnių vienos ar abiejų pėdų su šleivapėdyste abdukcija ir 30 laipsnių sveikosios pėdos abdukcija.
4. Patikrinkite, ar plokštelė įstatyta taip, kad jos galai būtų išlenkti 15 laipsnių kampu.



## Platformos atkabimas nuo lanksčios plokštelės

Sustiprintas fiksatorius neleidžia vaikui pačiam atkabinti plokštelės nuo platformos. Plokštelė atlaisvinama ir atkabinama nuo platformos su atlaisvinimo spaustuku.

Norėdami atlaisvinti ir atkabinti platformą nuo plokštelės:

1. Paspauskite plokščiąją fiksatoriaus dalį.



8 pav. Atlaisvinimo spaustuko pavyzdys

2. Ištraukite plokštelės galą iš platformos angos.

## Įtvaro uždėjimas vaikui

Jūs galite patys nuspręsti, kokia tvarka vaikui apmaiti batukus. Jeigu vaikas nerodo pasipriešinimo užmaunant batus, pirmiausia maukite batuką ant tos pėdos, kurią sudėtingiau apmaiti. Jeigu vaikui nepatinka mautis batų ir jis spardosi, tuomet pirmiausia maukite batuką ant pėdos, kurią lengviau apmaiti, nes tikėtina, kad vaikas daugiau spardysis maunant antrąjį batą.

### Kaip uždėti įtvarą vaikui:

1. Užmaukite ant vaiko pėdų puskojines ir patikrinkite, ar jos lygiai apspaudžia pėdą ir blauzdą, ar nėra raukšlių.

Naudokite medvilnines puskojines, kurios uždengia pėdą visur, kur batas liečiasi su pėda ir koja. Vaiko oda gali būti jautri po paskutinio gipso nuėmimo, ir / arba toje vietoje iš pradžių gali būti nedidelis patinimas, kuris turėtų praeiti po vienos ar dviejų dienų.



Clubfoot Solutions rekomenduoja SmartKnit AFO / KAFO puskojines. Apsilankykite:  
<http://www.smartknit.com/AFO-KAFO-socks>

2. Jeigu kojinių siūlės spaudžia vaiko kojų pirštukus, šiek tiek patraukite kojinių pirštų dalį į išorę.
3. Užmaukite batą ant vaiko pėdos.
4. Sulenkite vaiko kelį ir lengvai paspauskite žemyn šlaunį, kad kulnas įsistumtų į vietą.
5. Su nykščiu lengvai paspauskite pėdos viršų (ties čiurna) ir patikrinkite, ar kulnas matosi pro bato užkulnio angą.



9 pav. Vaiko kulno pastūmimas žemyn ir atgal

Pastaba: Bato užkulnis yra išgaubtas (didesnio dydžio), kad kulnas neslidinėtų. Vaiko kulną reikia pastumti žemyn ir atgal tiek, kiek leidžia batas.

6. Užlenkite liežuvį skersai per pėdos viršų ir patikrinkite, ar jis nesusigarankščiavęs. Žiūrėkite, kad liežuvio kraštas užeitų už bato AFO įdėklo ir nesiliestų su vaiko oda.

7. Tvirtai užsekite vidurinįjį dirželį. Tada užsekite kitus du dirželius. Galite pasižymėti dirželiuose naudojamais skylutes, kad kaskart žinotumėte, kad teisingai užsegate batą.



10 pav. Liežuvis už bato AFO įdėklo

Pastaba: Žiūrėkite, kad išlygintas liežuvis užeitų už bato AFO įdėklo

8. Pasižiūrėkite pro užkulnio angą, ar vaiko kulnas tebėra teisingoje padėtyje, t. y. nusileidęs žemyn.

Vaiko blauzdą lengvai patraukite aukštyn ir žemyn. Jeigu kojų pirštukai juda atgal ir pirmyn, kulnas nenusileidęs žemyn, tuomet stipriau suveržkite dirželius. Nesuveržkite pernelyg stipriai, kad nesutriktų kraujo apytaka. Įkiškite pirštą po vaiko kojų pirštukais ir patikrinkite, ar jie nepariesti į apačią. Kadangi vaikas auga, nesirūpinkite dėl to, kad batų priekinė dalis nepilnai užpildyta, jeigu vaikui gerai tinka likusi bato dalis. Naujų batų vaikui reikės tada, kai jo kojų pirštukai kaip reikiant išsikiš pro bato priekinį kraštą.

9. Įstatykite lanksčią plokštelę IOWA Flexbar į platformos angas, žiūrėdami, kad plokštelės galai būtų nukreipti į viršų, link vaiko kelių.

## Įtvaro nuėmimas

Įtvaro IOWA Brace sagtelės pagamintos taip, kad vaikas negalėtų jų atsisegti ir nusiimti įtvaro. Ant platformos esantis fiksatorius neleidžia vaikui atkabinti lanksčios plokštelės nuo platformų.

### Norėdami nuimti įtvarą:

1. Atsekite batą, pakeldami ir patraukdami dirželį, kad liežuvelis išlįstų iš sagtelės (11 pav.).
2. Norėdami atlaisvinti ir atkabinti lanksčią plokštelę IOWA Flexbar nuo platformos, atlaisvinimo spausduku paspauskite fiksatoriaus plokščiąją dalį ir patraukite plokštelę – ji išsitrauks iš platformos (12 pav.).

Į įtvaro IOWA Brace komplektaciją įeina du atlaisvinimo spausdukai, su kuriais tėvai ar globėjai gali lengviau nuimti įtvarą, kai jo nereikia nešioti. Papildomus spausdukus galima nusipirkti Clubfoot Solutions svetainėje [www.ClubfootSolutions.org](http://www.ClubfootSolutions.org)



11 pav.



12 pav.

## Valymas ir priežiūra

Visas įtvaro IOWA Brace dalis galima plauti vandenyje su muilu. Jeigu batai sušlapo, prieš užmaunant vaikui išdžiovinkite juos. Stenkitės nenaudoti cheminių medžiagų ir chloro tirpalų, nes jie gali sugadinti batų medžiagą.

Kiekvienas batas pritvirtintas prie plastmasinės platformos dviem metaliniais varžtais. Patikrinkite varžtus, ar platformos saugiai ir tvirtai pritvirtintos prie batų. Priveržkite varžtus, jeigu jie atsipalaidavę, tačiau nepriveržkite jų pernelyg stipriai.

## Pagalba tėvams ir globėjams dėl teisingo įtvaro nešiojimo

Į kiekvieno įtvaro Iowa Brace komplektaciją įeina du atlaisvinimo spaustukai, su kuriais tėvai ar globėjai gali lengviau nuimti įtvarą, kai jo nereikia nešioti. Papildomus spaustukus galima nusipirkti Clubfoot Solutions svetainėje [www.ClubfootSolutions.org](http://www.ClubfootSolutions.org)

Norėdama pabrėžti, kaip svarbu įtvarą nešioti teisingai, ir padėti tėvams bei globėjams, Clubfoot Solutions parengė ir siūlo šiuos informacijos šaltinius:

- Nemokama programėlė Clubfoot Solutions
- YouTube kanalas Clubfoot Solutions
- Svetainė Clubfoot Solutions

Daugiau informacijos apie šiuos šaltinius rasite svetainėje <http://www.clubfootsolutions.org/>.

## Problemos ir jų sprendimo būdai

Nuolat stebėkite, ar vaiko oda neparaudo, ar neatsirado pūslių. Normalu, jeigu paraudimas išnyksta po maždaug dvidešimties minučių. Jeigu paraudimas išlieka ilgiau kaip dvidešimt minučių arba atsiranda pūslių, gali būti, kad:

- per laisvai užsegti dirželiai (dažniausia priežastis);
- vaikas išaugo batukus;
- per stipriai užsegti dirželiai;
- batų medžiaga arba puskojinės susigarankščiavę ties oda;
- bato liežuvis neužklotas už įdėklo krašto.

Jeigu paraudimas nepraeina per dvidešimt minučių arba atsiranda pūslių, labai svarbu nustatyti priežastį, dėl ko taip atsitiko. Atsiminkite, kad įtvarą Iowa Brace galima nešioti tik esant visiškai išgydytai (koreguotai) šleivapėdystei. Įtvaro negalima naudoti dalinės šleivapėdytės korekcijos atveju arba esant šleivapėdytės recidyvui.




## CLUBFOOT SOLUTIONS GAMINI IOWA BRACE S RAŠAS

DALIES NUMERIS	GAMINIO PAVADINIMAS	APRAŠYMAS	IŠSAMUS APRAŠYMAS	MATAVIMO VNT.
CFS-000	Iowa Brace	Pusiau kietas šleivap dyst s koregavimo tvaras AFO , dydis 000	eina batai, lanksti plokštel , platforma, intarpai, varžtai, atlaisvinimo spaustukas	Pora
CFS-00	Iowa Brace	Pusiau kietas šleivap dyst s koregavimo tvaras AFO, dydis 00	eina batai, lanksti plokštel , plat forma, intarpai, varžtai, atlaisvinimo spaustukas	Pora
CFS-0	Iowa Brace	Pusiau kietas šleivap dyst s koregavimo tvaras AFO, dydis 0	eina batai, lanksti plokštel , plat forma, intarpai, varžtai, atlaisvinimo spaustukas	Pora
CFS-1	Iowa Brace	Pusiau kietas šleivap dyst s koregavimo tvaras AFO, dydis 1	eina batai, lanksti plokštel , plat forma, intarpai, varžtai, atlaisvinimo spaustukas	Pora
CFS-2	Iowa Brace	Pusiau kietas šleivap dyst s koregavimo tvaras AFO, dydis 2	eina batai, lanksti plokštel , plat forma, intarpai, varžtai, atlaisvinimo spaustukas	Pora
CFS-3	Iowa Brace	Pusiau kietas šleivap dyst s koregavimo tvaras AFO, dydis 3	eina batai, lanksti plokštel , plat forma, intarpai, varžtai, atlaisvinimo spaustukas	Pora
CFS-4	Iowa Brace	Pusiau kietas šleivap dyst s koregavimo tvaras AFO, dydis 4	eina batai, lanksti plokštel , plat forma, intarpai, varžtai, atlaisvinimo spaustukas	Pora
CFS-5	Iowa Brace	Pusiau kietas šleivap dyst s koregavimo tvaras AFO, dydis 5	eina batai, lanksti plokštel , plat forma, intarpai, varžtai, atlaisvinimo spaustukas	Pora
CFS-6	Iowa Brace	Pusiau kietas šleivap dyst s koregavimo tvaras AFO, dydis 6	eina batai, lanksti plokštel , plat forma, intarpai, varžtai, atlaisvinimo spaustukas	Pora
CFS-7	Iowa Brace	Pusiau kietas šleivap dyst s koregavimo tvaras AFO, dydis 7	eina batai, lanksti plokštel , plat forma, intarpai, varžtai, atlaisvinimo spaustukas	Pora
CFS-8	Iowa Brace	Pusiau kietas šleivap dyst s koregavimo tvaras AFO, dydis 8	eina batai, lanksti plokštel , plat forma, intarpai, varžtai, atlaisvinimo spaustukas	Pora
CFS-9	Iowa Brace	Pusiau kietas šleivap dyst s koregavimo tvaras AFO, dydis 9	eina batai, lanksti plokštel , plat forma, intarpai, varžtai, atlaisvinimo spaustukas	Pora
CFS-1-B	Iowa Brace	Abdukcinis tvaras – plokštel Dennis Browne Bar	20,32 cm (8 coli ) lanksti plokštel	Viena
CFS-2-B	Iowa Brace	Abdukcinis tvaras – plokštel Dennis Browne Bar	25,40 cm (10 coli ) lanksti plokštel	Viena
CFS-3-B	Iowa Brace	Abdukcinis tvaras – plokštel Dennis Browne Bar	30,48 cm (12 coli ) lanksti plokštel	Viena
CFS-PLAT	Iowa Brace	Greito atkabinimo mechanizmas	Abipus p platforma, 60 ir 30 laipsni	Viena
CFS-PLUG	Iowa Brace	Stabdymo intarpas abipusei platformai	Parduodama po 2 / pakuot	Viena
CFS-SCR-1	Iowa Brace	Platformos varžtai, 13mm, priekiniai	Parduodama po 2 / pakuot	Viena
CFS-SCR-2	Iowa Brace	Platformos varžtai, 17 mm, galiniai	Parduodama po 2 / pakuot	Viena
CFS-KEY	Iowa Brace	Atlaisvinimo spaustukas	Parduodama po 2 / pakuot	Viena

## VIDPADŽIO ILGIS PAGAL AVALYNĖS DYDĮ

### VAIKŲ AVALYNĖS DYDŽIAI JAV

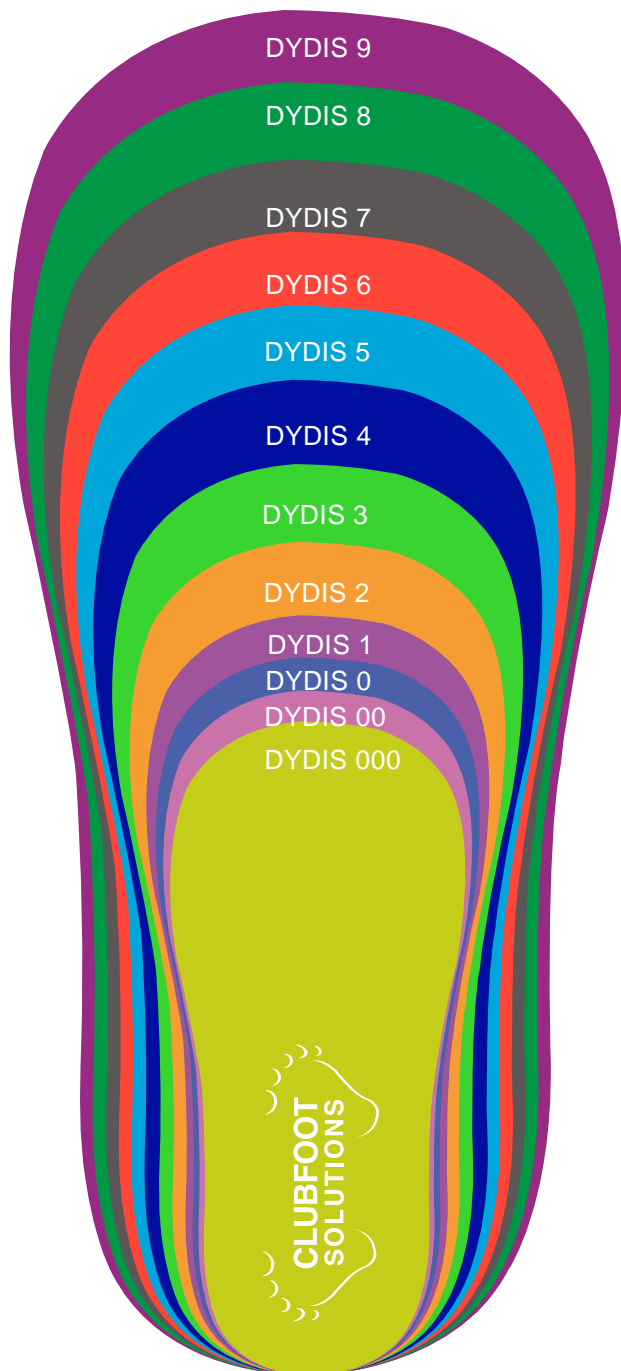

#### DYDIS:

000	88 MM
00	92 MM
0	97 MM
1	102,1 MM
2	112,1 MM
3	122,2 MM
4	133,7 MM
5	143,7 MM
6	153,7 MM
7	163,6 MM
8	173,6 MM
9	183,6 MM



CLUBFOOT SOLUTIONS, INC.  
3214 WESTMINSTER RD  
BETTENDORF, IA 52722 USA  
563-232-1103  
[INFO@CLUBFOOTSOLUTIONS.ORG](mailto:INFO@CLUBFOOTSOLUTIONS.ORG)



EMERGO EUROPE  
Prinsenvoergracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands